

MACSMIX™

コンパクト&コードレスローテーター

コードレスだから
どこでも使える
すぐれもの



冷蔵庫、
インキュベータの中でも、くるくる!

ウィンターキャンペーン!!

穏やかな回転、インターバル機能は、様々な反応に効果的です。

通常希望納入価格
~~178,000円~~

33.3%
OFF

期間：～平成24年3月30日(金)まで

118,000円

MACSmix™ は、充電式バッテリーで作動する 用途の広いチューブ回転装置です。


特長

- コンパクト(L281×W96×H85mm)で場所を取りません。
- コードレスですから冷蔵庫、インキュベーター内に設置することができます(2℃~42℃の温度範囲で使用可能)。
- 4時間充電により48時間作動。
- 5つの回転モードで、最適な攪拌条件を選べます。



■0.5mL~2mLチューブ用のスモールラック


- ・サイズが1.5mL~2mLのチューブ16本、またはサイズが0.5mLのチューブ16本を装着できます。
- ・スモールラックをMACSmix™本体の支持部分②にカップリング①を合わせてセットします。

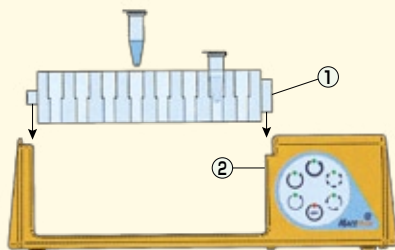

(0.5mLと2mLのチューブは一緒にラックに装着できます。)

■5mL~50mLチューブ用のラージラック

- ・サイズが5mL~15mLのチューブ8本、またはサイズが50mLのチューブ4本を装着できます。
- ・可動式スプリングロードディスク③のネジ④を調節することで、適切なチューブの長さ調節できます。
- ・ラージラックをMACSmix™本体の支持部分②にカップリング①を合わせてセットします。

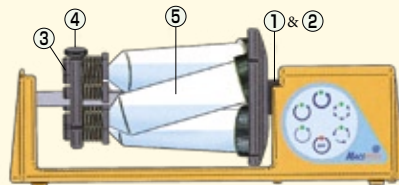

(15mLと50mLのチューブは一緒にラックに装着できます。)

仕様

サイズ	本体: (L) 281 × (W) 96 × (H) 85mm	電源	本体: 12 VDC, 20 W ACアダプター: 100-240 VAC, 50-60 Hz
重量	本体: 430g	内蔵バッテリー	NiMH充電電池 4本
作動モード	連続: 4rpm, 8rpm又は12rpm インターバル: 12rpm (30秒) - 休止 (1分) 又は 12rpm (30秒) - 休止 (5分)	作動環境	温度: 2℃~42℃ 湿度: 0%~85%

包装・価格

オーダー番号	品名	内容	包装	希望納入価格	キャンペーン価格
130-090-753	MACSmix™ (マックスミックス)	MACSmix™本体、ACアダプター スモールラック (0.5~2.0mLチューブ用) ラージラック (5~50mLチューブ用) スクリュードライバー マニュアル、NiMH充電電池 4本	1台	178,000円	118,000円

平成23年1月現在の希望納入価格です。上記価格には消費税は含まれておりません。

1112A200

学術技術情報は弊社ホームページwww.miltenyibiotec.co.jpでご覧いただけます。



■輸入販売元

ミルテニー バイオテック株式会社

〒135-0041 東京都江東区冬木16-10 日通永代ビル5F
TEL: 03-5646-8910(代) FAX: 03-5646-8911
【ホームページ】 www.miltenyibiotec.co.jp
【E-mail】 macs@miltenyibiotec.jp

■取引店

細胞分離をお考えの研究者の方々へ、最適なソリューションをご提案します。
まずはメール・お電話を!

学術的なお問い合わせ ☎ 03-5646-9606

AM9:00~PM5:00
(土日祝日除く)

機器修理のお問い合わせ ☎ 0120-03-5645

(カスタマーコールセンター)

E-mail: macs@miltenyibiotec.jp